Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sistem taiat si finisat Do-All Proxicut Tor Vm



Pret:

373,37 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Set Proxicut System:

• Suport Proxicut cu cheie = 1 buc

• Mâner = 1 buc

• Benzi diamantate Proxicut (grosier) = 12 buc

• Benzi diamantate Proxicut (medii) = 12 buc

• Benzi diamantate Proxicut (fine) = 12 buc

• Pânze de fer?str?u Proxicut = 12 buc

Do all Proxicut este un sistem de benzi de restaurare care este proiectat pentru a ob?ine o ajustare excelent? a contactului proximal ?i o a?ezare marginal? complet? a coroanelor, fa?etelor, inlay-urilor/onlay-urilor ?i conturarea proximal? a obtura?iilor compozite cu acurate?e, cu timp ?i efort minim. Proxicut IPR (InterProximalReduction) face ca îndep?rtarea smal?ului interproximal s? fie sigur? ?i precis?, f?r? a crea col?uri ascu?ite

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

sau margini subgingivale.

Sistem conceput pentru utilizarea ?i cu tratamente ortodontice. Benzile flexibile se pot curba ?i se pot conforma contururilor naturale ale din?ilor pentru a maximiza confortul ?i siguran?a pacientului.

Proxicut vine cu o band? de margine a dintelui de fer?str?u (lam?) pentru t?iere ?i o band? cu suprafa?a abraziv? ondulat? pentru cur??area dintre spa?iul interdentar ?i lustruirea suprafe?ei dintre din?i.

Instructiuni de utilizare:

1. Introduce?i suportul în orificiul unei lame sau unei benzi ?i îndoi?i lama/banda în jurul ambelor bra?e ale suportului


2. Introduce?i degetul opus al suportului în al doilea orificiu al lamei/benzii ?i strânge?i lama/benzii rotind mânerul cu ?urub al suportului.

3. Când instrumentul este gata, pute?i indeparta exccesul de material prin mi?carea de balansare a lamei/benzii în spa?iul inter-proximal. Toate p?r?ile sistemului sunt realizate dintr-un o?el inoxidabil chirurgical de înalt? calitate. Avantaje: • Designul ergonomic cu o singur? mân? ofer? control tactil optim ?i reduce oboseala mâinii. • Elimina necesitatea de a tine instrumente mici si de a folosi instrumente rotative sau folii articulate. • Deschidere central? pentru percep?ie vizual? îmbun?t??it? ?i acces pentru instrumente. • Designul prietenos cu pacientul previne iritarea tesuturilor moi. • Benzile flexibile se conformeaz? contururilor naturale ale din?ilor pentru a evita crearea col?urilor ascu?ite. • Autoclavabil ?i reutilizabil. • Nu va îndep?rta smal?ul excesiv. • Economise?te timpul pe scaun. • Eficient pentru zonele anterioare si posterioare. CUM SE OPERA CU DO-ALL PROXICUT HOLDER ? 1.369: Roti?i ?urubul 1 pentru a apropia bra?ele suportului do-all proxicut pentru a face distan?a dintre marginile exterioare

ale bra?elor suportului egal? cu lungimea pânzei de fer?str?u ? 1.384 sau a benzii de diamant ? 1.385. Introduce?i pânza de fer?str?u ? 1.384 sau banda diamantat? ? 1.385 în clemele 2 ale bra?elor suport ?i strânge?i clemele cu cheia 3.

Mod de utilizare :


1. Roti?i mânerul ?urubului 1 pentru a apropia picioarele suportului do-all proxicut, astfel încât distan?a dintre p?r?ile exterioare ale picioarelor suportului s? devin? egal? cu lungimea lamei

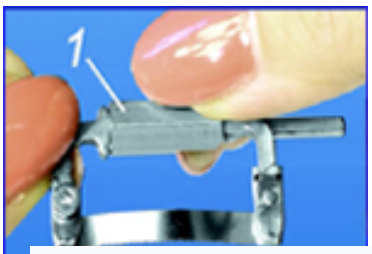

2. Introduce?i lama (banda) în clemele 2 ale picioarelor suportului ?i strânge?i clemele cu cheia 3.



3. Roti?i mânerul ?urubului 1 pentru a strânge lama (banda) între picioarele suportului.

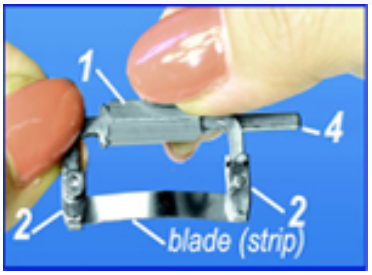

4. Fixarea suport-mâner

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273



5. Suportul Do-all Proxicut poate fi, de asemenea, operat f?r? mâner sau fixat într-o pies? de mân? de tip EVE, oferind mi?care înainte ?i înapoi.

