

Clearfil Ceramic Primer Plus



Pret:

763,99 lei TVA inclusa

Descriere produs:

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS este un primer protetic universal pentru toate indicațiile de cimentare și reparare. Produsul încorporează atât monomerul original MDP de la Kuraray Noritake cât și un monomer silanic. Aceasta duce la o rezistență adezivă excelentă la toate ceramicile pe bază de oxid de siliciu, la oxidul de zirconiu, compozite și chiar și la metale, toate la un înalt nivel de simplitate procedurală. CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS se potrivește perfect cu cimentul rășinic adeziv PANA VIA™ V5 pentru proceduri de cimentare sigure.

Un primer pentru restaurări

Toate tipurile de restaurări.

Nu a fost niciodată atât de ușoară și puternică adeziunea restaurărilor.

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS este indicat pentru:

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com : I/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273



Tratarea suprafeței restaurărilor protetice din ceramică de oxid sau vitroasă, ceramică hibridă, rășină compozită sau metal



Reparații intraorale ale restaurărilor fracturate realizate din ceramică de oxid sau vitroasă, ceramică hibridă, rășină compozită sau metal

Rezistență adezivă asigurată

Cum este posibilă formarea unei adeziuni puternice la toate tipurile de materiale de restaurare, cu o singură sticlă de primer? Totul ține de chimie.

Monomerul original MDP aderă puternic de metale și oxidul de zirconiu.

Și agentul MPS de cuplare cu silan va face același lucru pentru compozite și materialele ceramice pe bază de oxid de siliciu. Acești monomeri adezivi consacrați dau medicilor stomatologi motive pentru a avea încredere în procedurile lor de cimentare și reparare.

Și asistenții? Ei vor îndrăgi cu siguranță simplitatea procedurii.

Doar aplicați și uscați

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS poate fi aplicat pe orice suprafață de restaurare după pretratarea necesară. Pentru simplitate maximă și rezultate ideale, produsul poate fi combinat cu PANAVIA™ V5:

D TEHNICALDENT


Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273



LEGENDA

- Sablați, clătiți și uscați
- Pretratați suprafața aderentă a restaurării, așa cum se indică
- Aplicați acid fluorhidric, clătiți și uscați *1
- Aplicați seringă K-ETCHANT Syringe, lăsați timp de 5 sec, clătiți și uscați

Exemplu de cimentare a unei coroane

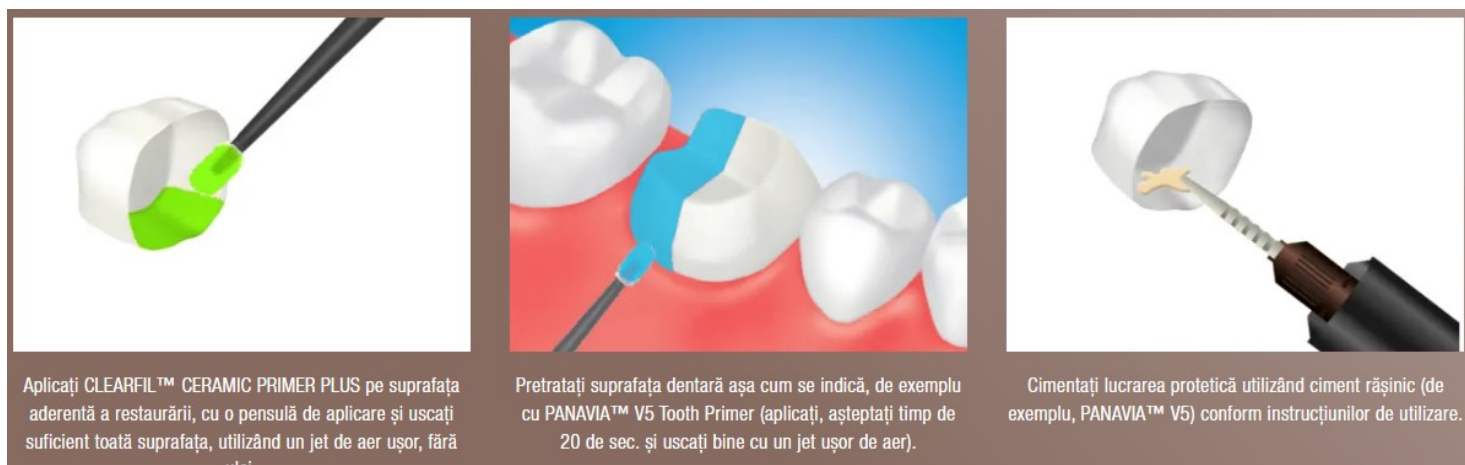

MDP. Ce altceva?

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS conține monomerul original MDP, un component esențial al oricărui produs adeziv de la Kuraray Noritake.

Fiind utilizat de peste 35 de ani, MDP oferă o adezivitate excelentă dovedită. MDP oferă o adeziune rezistentă nu numai la structura dentară, dar și la metale și la oxidul de zirconiu. CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS conține un monomer MDP cu puritate specială, care formează o adeziune puternică între ciment și restaurare.

Prezentare



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Flacon 4 ml