


## Ace One Curve Mini B5 Micro-Mega sterile

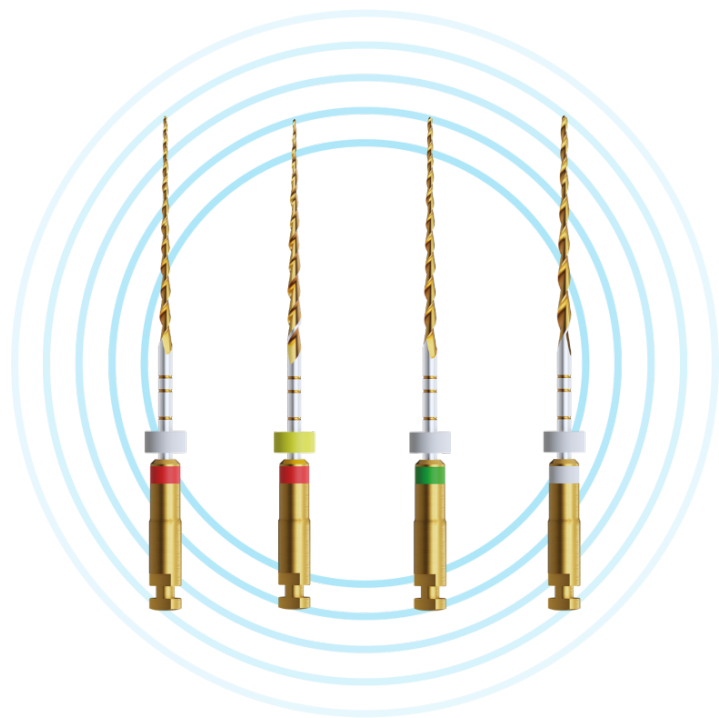

Pret:

**309,07 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Ace endodontice cu pana la 100% mai flexibil si de 2.4x mai rezistente (in comparatie cu alte ace Ni-Ti conventionale)

Un singur ac capabil sa instrumenteze canalul radicular direct pana la apex!

OneCurve mini este fabricat dintr-un aliaj Ni-Ti tratat termic printr-o tehnologie patentata: C-Wire! Poate fi precurbat cu usurinta!

Grosimea acului NiTi mai mica: 1mm

C. Wire este un proces patentat de tratare termica a aliajului Ni-Ti, dezvoltat exclusiv și implementat de MICRO-MEGA pentru acele OneCurve.

Combinat cu designul brevetat al acestui ac, C.Wire definește One Curve: este un instrument inteligent, eficient și conservator cu tesaturile dentare.

**Un instrument inteligent**



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Este nevoie doar de un singur instrument pentru instrumentarea mecanica a canalului radicular.

Utilizare unică anuleaza riscurile de contaminare încrucișată. Confort pentru medic si siguranta maxima pentru pacienti.

### **Un instrument eficient**

Acul este mai flexibil si mai rezistent la separare.

Tratamentul termic patentat C.Wire: memorie controlată a aliajului NiTi și capacitatea de a pre-curba acul pentru un acces mai ușor pe canalul radicular și eliminarea obstacolelor.

Conicitate si diametru perfect alese pentru o instrumentare finală care respectă standardele unei curățări optimizate.

Respecta anatomia originala a dintelui

### **Un instrument conservator**


Secțiune transversală variabilă de-a lungul acului este alta caracteristica brevetata si unica firmei MicroMega.

Primii 4mm ai acului au o sectiune triplu helix, ceea ce imbunatateste centrarea acului in treimea apicala a canalului radicular

Urmatoarea zona a acului (medie si coronara) este in sectiunea in forma de S, ajutand la îndepărtarea excelentă a detritusului dentinar.

# D TEHNICALDENT


Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273

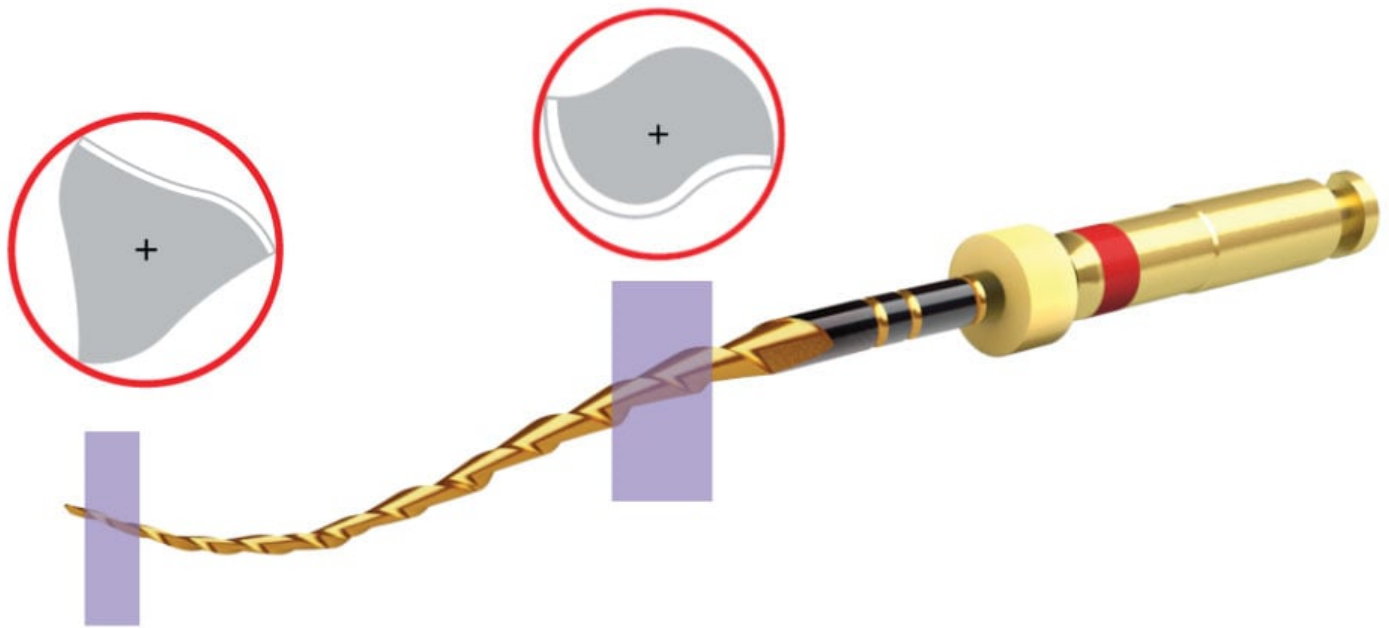

Capacitate dovedită de tăiere. Protocol de lucru simplu: mișcare directă în jos spre lungimea de lucru.

Se recomanda utilizarea in rotatie continua la o turatie intre 300 si 450 rpm si cu un torque (cuplu) maxim de 2.5 Ncm. Turatia recomandata este 300rpm.

## Protocol MicroMega One Curve mini

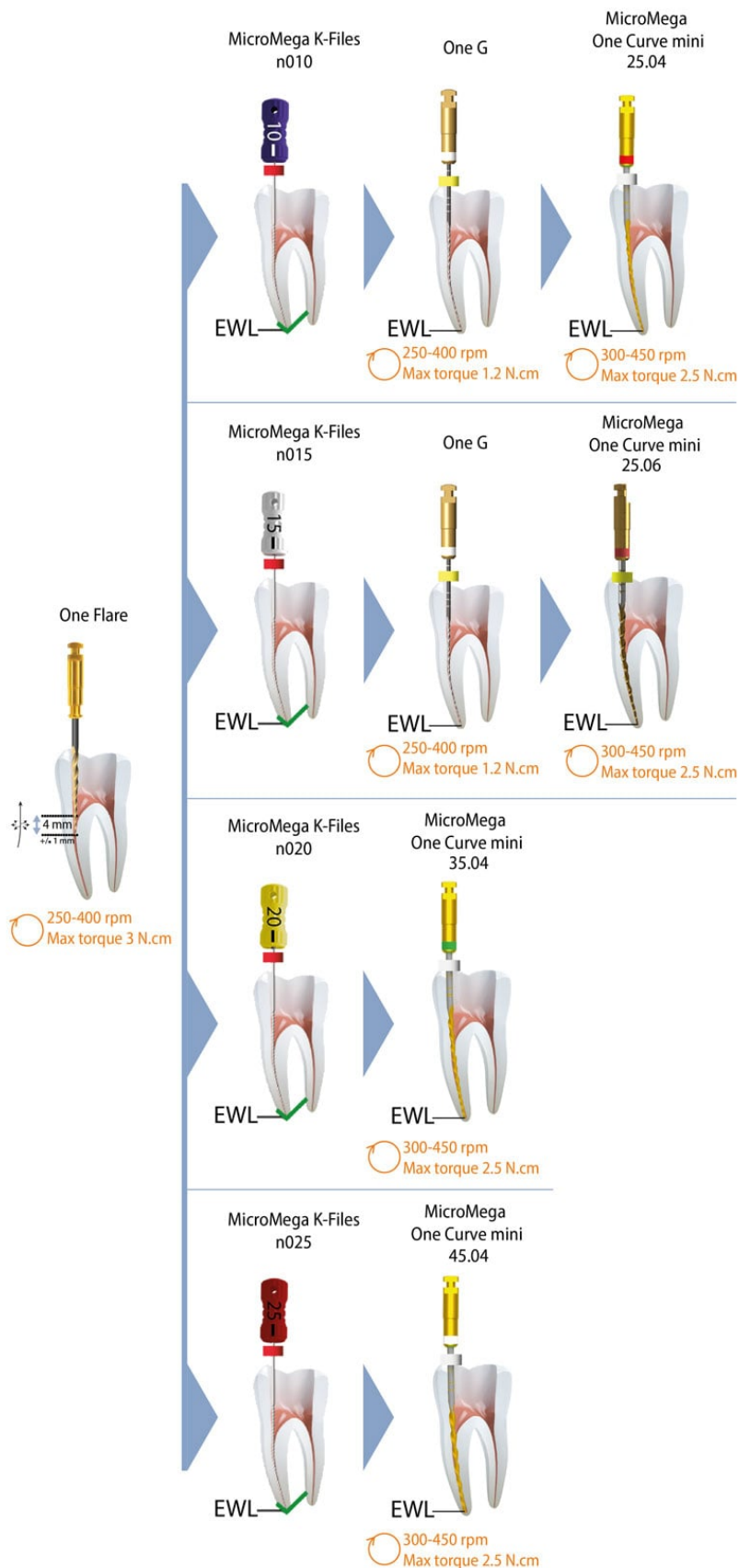



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## **Prezentare**

Set 5 ace sterile - 25mm/.25 (conicitate 4%), 25mm/Asortate