


## **Ingoturi disilicat de litiu ROSETTA SP PRESS HT 5x3g**

**Pret:**

**295,80 lei TVA inclusa**

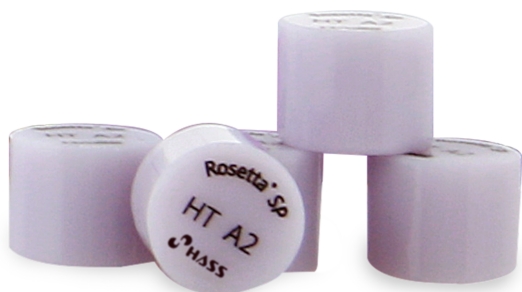

### **Descriere produs:**

Rosetta® SP, un produs inovator sub forma de ingoturi/pastile ceramica presata pe baza de disilicat de litiu cu rezistenta fiabila, proprietati stabile si precizie ridicata

Estetica naturala, cu translucente multiple (HT, LT, MO) si o gama completa de nuante A-D + W (bleach).

Rezistenta ridicata: 460 MPa rezistenta la flexiune biaxiala

Reactie chimica minima in timpul presarii – nu necesita acid fluorhidric pentru curatare

Indicatii de utilizare: inlay, onlay, fatete, coroane anterioare/posterioare, puncti 3 elemente (pana la al 2-lea premolar)

Rosetta SP este materialul presabil pe baza de disilicat de litiu, destinat restaurarilor integral ceramice prin tehnica presarii.

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Se evidentiaza prin:


Estetica naturala, cu translucente multiple (HT, LT, MO) si o gama completa de nuante A–D + W(bleach).

Rezistenta ridicata: 460 MPa rezistenta la flexiune biaxiala – rezistenta biaxiala la incovoiere a restaurarilor dupa cristalizare

Reactie chimica minima in timpul presarii – nu necesita acid fluorhidric pentru curatare

Ofera o combinatie ideala intre estetica naturala, rezistenta mecanica si simplitate in procesul de laborator.

Datorita transluciditatii si nuantelor sale Rosetta® SP este potrivita pentru restaurari cu un aspect cat mai natural.

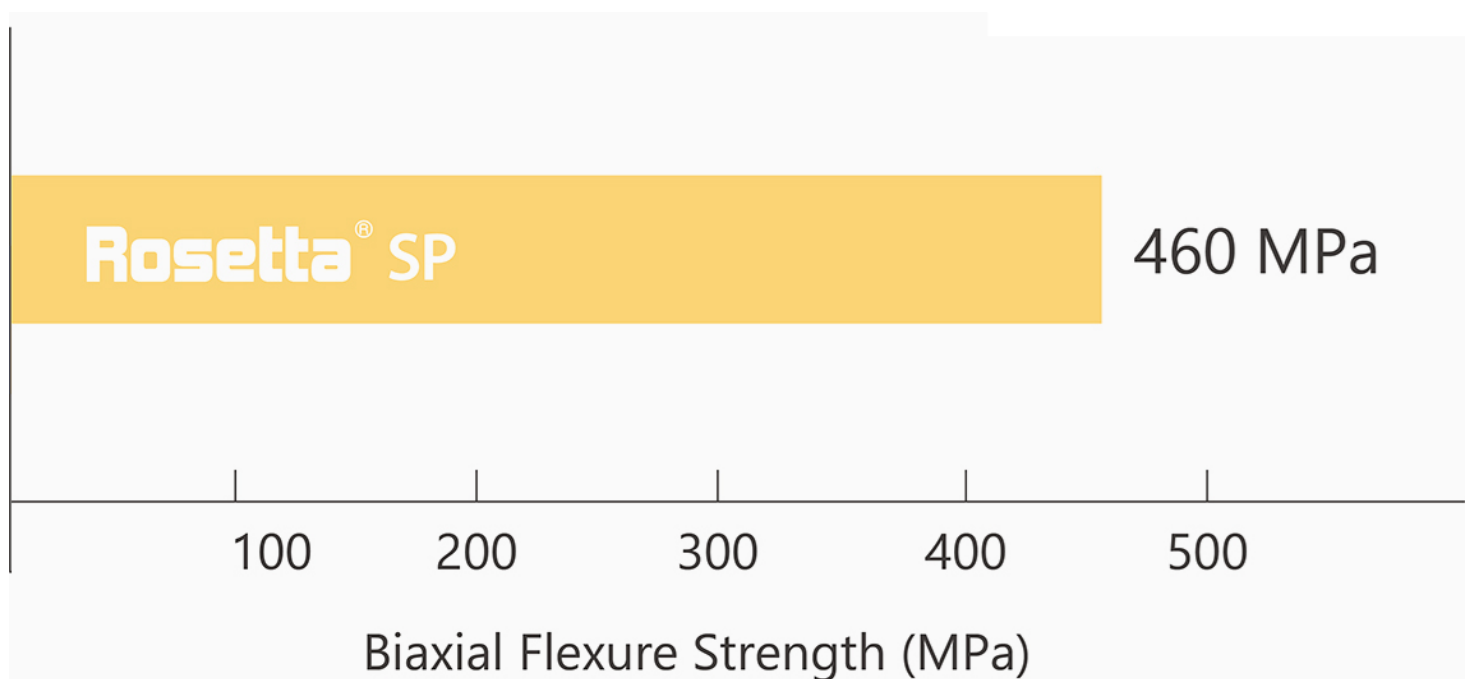

## Indicatii de utilizare:

Inlay / Onlay

Fatete (veneers)

Coroane anterioare si posterioare

Punte de 3 elemente in zona anterioara (pana la al 2-lea premolar)

## Beneficii imediate:

# D TECHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Usor de frezat – economie de timp si uzura redusa a frezelor



Paleta larga de nuante – Cheia Vita A-D si Bleach = adaptabilitate estetic

Rosetta SM ofera o paleta larga de opacitati, ceea ce il face versatil pentru integrare estetica: HT (High Translucency); LT (Low Translucency); MO (Medium Opacity)

Integrare excelenta in workflow CAD/CAM: Flux de lucru eficient. Rezultate fiabile.

Rezistenta biaxiala la incovoiere a restaurarilor realizate din Rosetta® SM dupa cristalizare este de 440 MPa

Material optimizat pentru procesul de frezare fara risc de ciobire, pentru a asigura stabilitatea pe fiecare muchie prin tehnologia avansata de structura microcristalina dezvoltata de HASS.

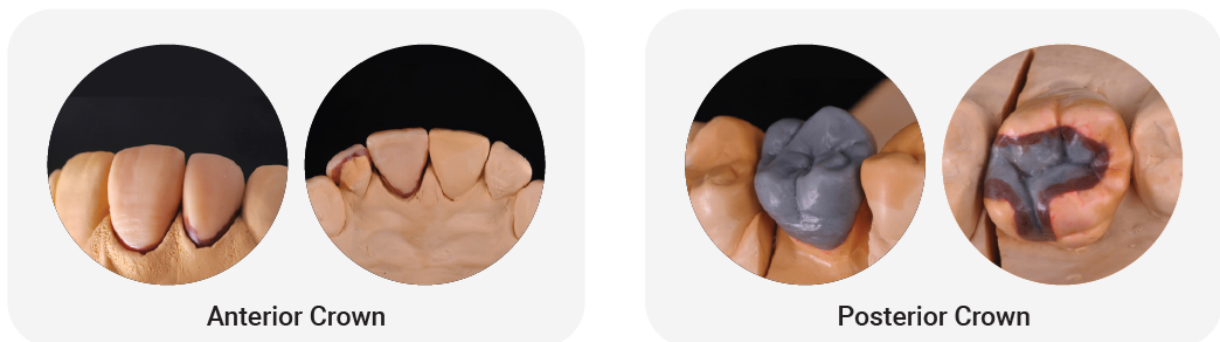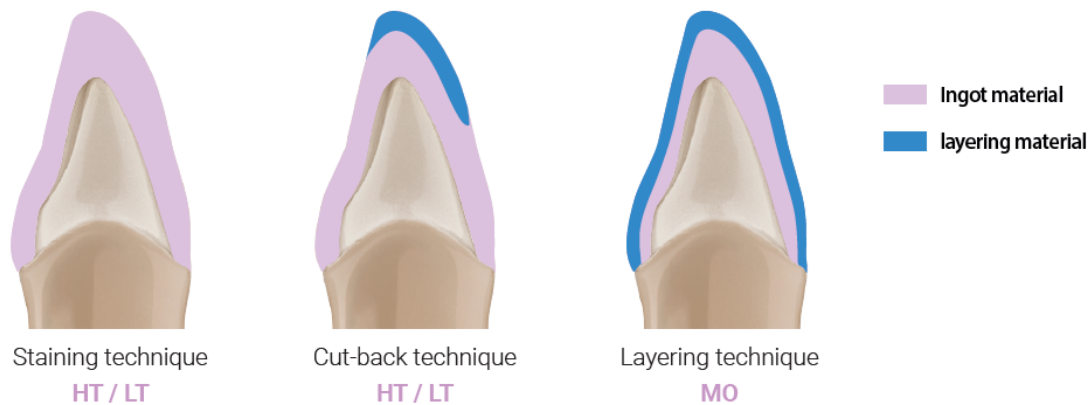

## Beneficii imediate:

Manipulare familiara – se comporta similar cu e.max® Press.

Presare simplificata – strat de reactie foarte redus, fara acid HF (acid fluorhidric). Dupa presare ramane doar o cantitate mica de strat de reactie pe produs. Acest lucru elimina necesitatea aplicarii lichidului acid pentru curatarea stratului de reactie, asigurand un proces simplu si nepericulos.

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Compatibilitate extinsa – compatibila cu majoritatea maselor de ambalat si glazurilor ceramice

## **Beneficii pe termen lung:**

Restaurari stabile si rezistente la fisurare.

Estetica predictibila datorita transluentelor si optiunilor de stratificare.

Costuri mai mici decat brandurile premium consacrate, dar cu performanta comparabila.

## **Dimensiuni si nuante disponibile:**

HT (High Translucency) – pentru estetica maxima

LT (Low Translucency) – pentru echilibru intre forta si estetica



MO (Medium Opacity) – pentru cazul pe bonturi inchise la culoare

Nuantele acopera sistemul VITA (A1–D4) si nuante de bleach W1–W4

# TEHNICALDENT


Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273


Rosetta® SP		Dimensions (mm)	pcs / Pack
	R10	Ø12.7xT10	5 ingots
	R20	Ø12.7xT20	3 ingots

\* R10 can be used in either a 100 g or 200 g investment ring.

## HT(High Translucency)

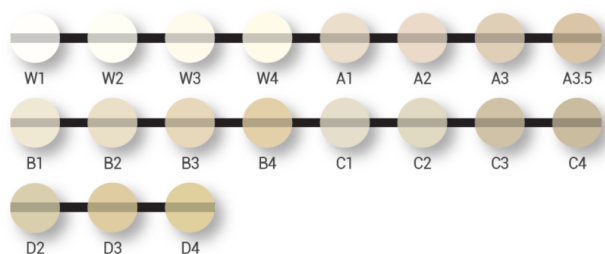

## LT(Low Translucency)

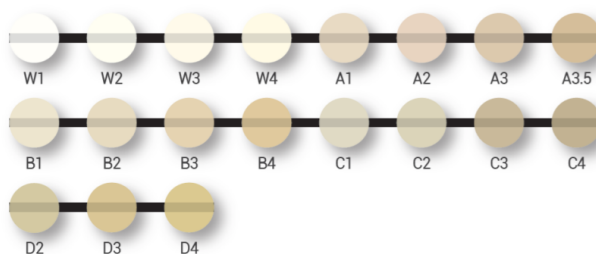

## MO(Medium Opacity)



## Specificatii tehnice:

Rezistenta la flexiune: 460 MPa

Coefficient de expansiune: CTE  $10.1 \pm 0.5 \times 10^{-6} K^{-1}$

Solubilitate chimica:  $100 \mu g/cm^2$

Dimensiuni ingoturi: R10 (Ø12.7×10 mm)

Sisteme compatibile cu sisteme de presare deschise

## Comparatie cu produse similare:

Caracteristic?	Rosetta SP	IPS e.max Press	Celtra Press
Baza material?	Disilicat de litiu	Disilicat de litiu	Litiu-silicat cu zirconiu
Rezisten?? la flexiune	460 MPa	~470 MPa	~500 MPa
Translucen?e disponibile	HT, LT, MO	HT, MT, LT, MO	T (opacitate medie)
Cur??are cu acid HF	Nu necesit?	Necesit?	Necesit?
Cost estimativ	Mai accesibil	Ridicat	Mediu-ridicat
Indica?ii pentru pun?i	Pân? la 3 elemente	Pân? la 3 elemente	Doar elemente unice

# **D** TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## **Prezentare**

- Set 5 x Ingoturi disilicat de litiu ROSETTA SP PRESS HT 5 x 3 g
- Dimensiune 12.7 mm diametru x 10 mm inaltime