

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## PACHET SISTEM ROTATIV V-TAPER GOLD 2+1 GRATUIT



Pret:

**300,78 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Sistem de ace cu flexibilitate progresivă și rigiditate excelentă în canalele de pregătire, având ca  
obiectiv, asigurarea flexibilității și rigidității necesare pentru a obține curățarea

Sistem de ace similar și compatibil cu sistemul Protaper Gold - marca înregistrată Maillefer.

Tehnologie a acelor AF-R Wire pentru acele Shaping.

Tehnologie de aliaj AF-R pentru acele de preparare

Tehnologie de aliaj AF-H pentru acele de finisare

3 ace de preparare, 3 ace de finisare

Elasticitate înaltă a aliajului NiTi

Perfecte pentru prepararea canalelor radiculare curbate

Design special Variable Taper (Conicitate Variabilă) cu 6 ace

### Endo Stop

Marchează precis lungimea canalului și indică direcția de îndoire a acului

### Profil triunghiular

Design triunghiular convex, pentru o mai bună capacitate de tăiere

### Rotație continuă

Mișcare de rotație continuă

Setare motor: 350 rpm, 2.7 Ncm, rotație forward.

# D TECHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273

instrumente cu expansiune treptată

**Viteza: 350 rpm**

**Cuplu: 2.0 Ncm**


frata AF Termic special înseamnă folosirea pentru producerea de efecte termice exclusive prezint? un

fabrica sistemelor de iradiere, precum? icazate sistice petale, ce are în ajutorul de aza refosta

Principalele caracteristici sunt: a) rigiditate și rezistență la rupere; b) rezistența la oboseală;

Alte caracteristici sunt: c) rezistența la coroziune; d) rezistența la uzură; e) rezistența la impact;

Alte caracteristici AF Termic sunt: f) rezistența la oxidare; g) rezistența la radiații; h) rezistența la

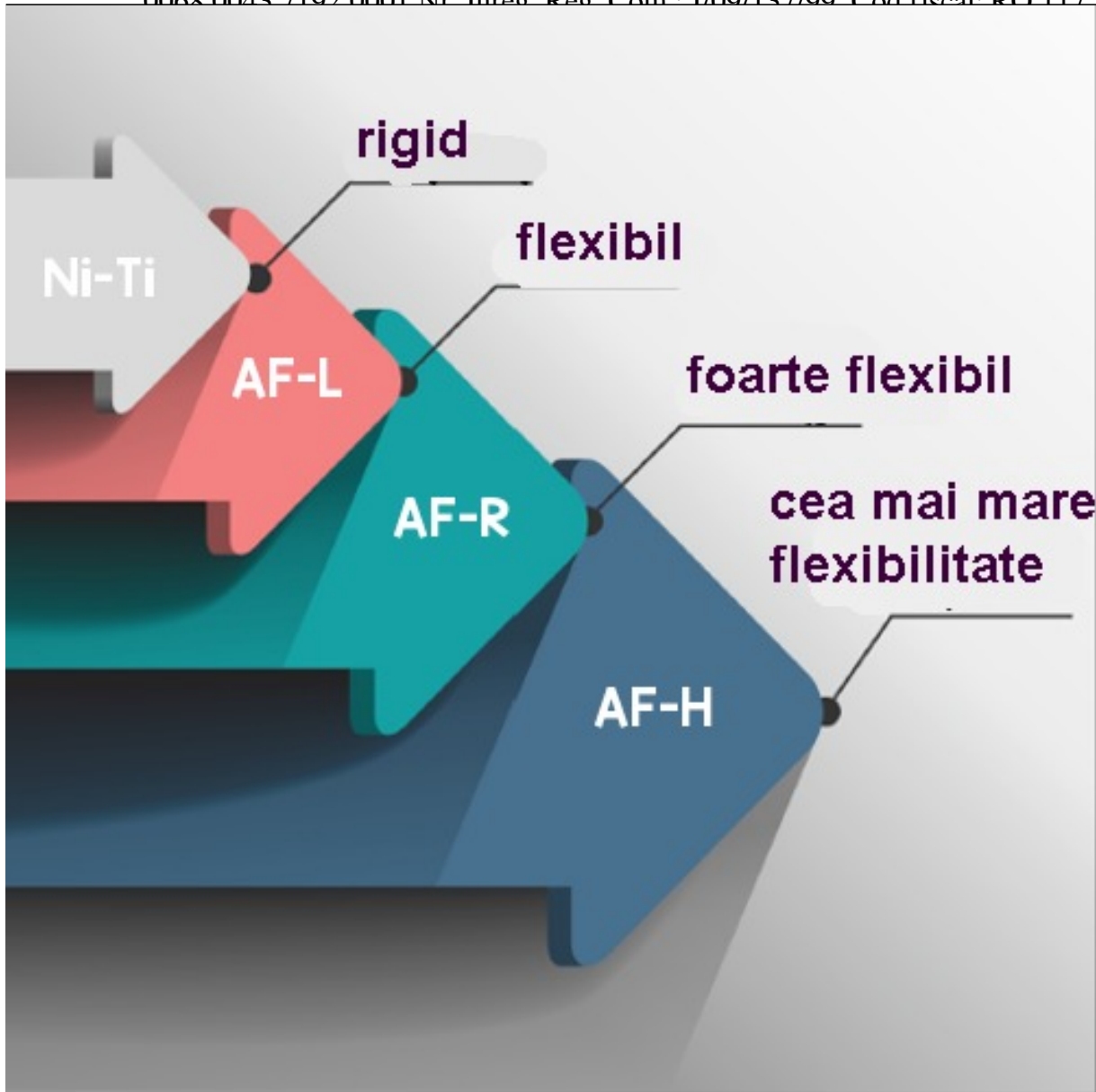

## Instructiuni de utilizare

Accesul la pân? pentru Canalizare pân? la lungimea de lucru cu un ac Kerr de 10. Crea?i o cale de acces manual? cu Kerr 15; Kerr 20

Apoi folosi?i S1 pân? la WL

Apoi folosi?i S2 pân? la WL

Apoi verifica?i cu apex locatorul lungimea de lucru WL folosind un ac Kerr 20.


Apoi folosi?i F1 pân? la WL

Apoi folosi?i F2 pân? la WL

Op?ional, în canale largi, folosi?i F3 pân? la WL

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273

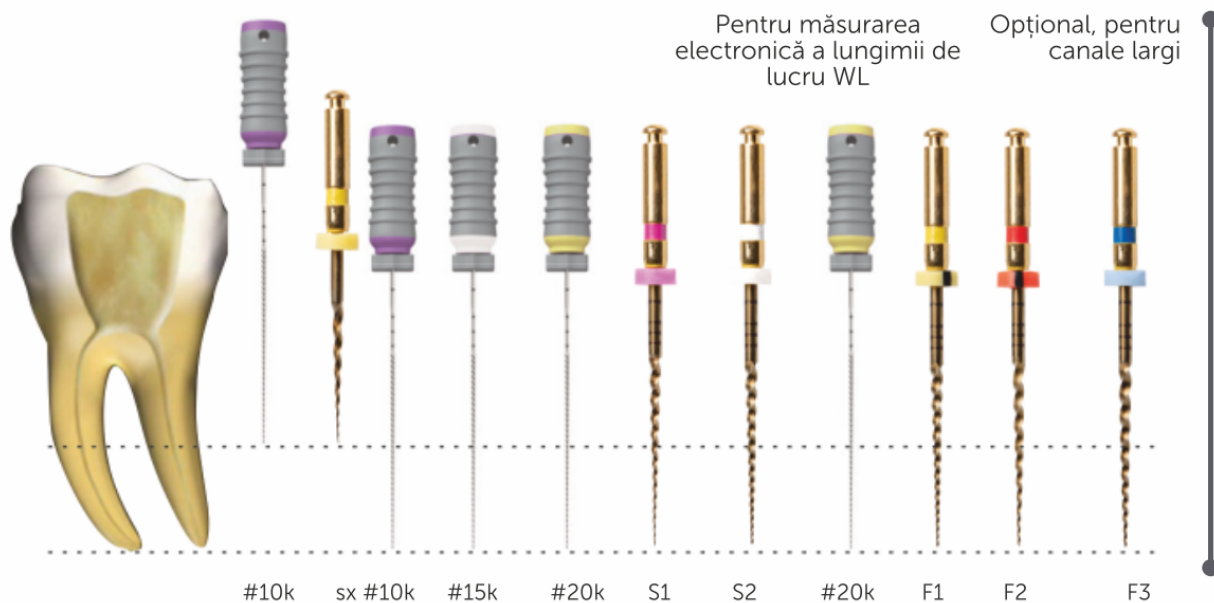

(pachetul conține 6 instrumente)

	21 mm	25 mm	31 mm	Taper	Dimensiune
SX		√		04	#19
S1	√	√	√	02	#18
S2	√	√	√	04	#20
F1	√	√	√	07	#20
F2	√	√	√	08	#25
F3	√	√	√	09	#30
Asortate	√	√	√	-	-

## Prezentare

Secvența completă (SX-F3) sau mărimi individuale