
Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ac curatare canal AF MAX Blue 3

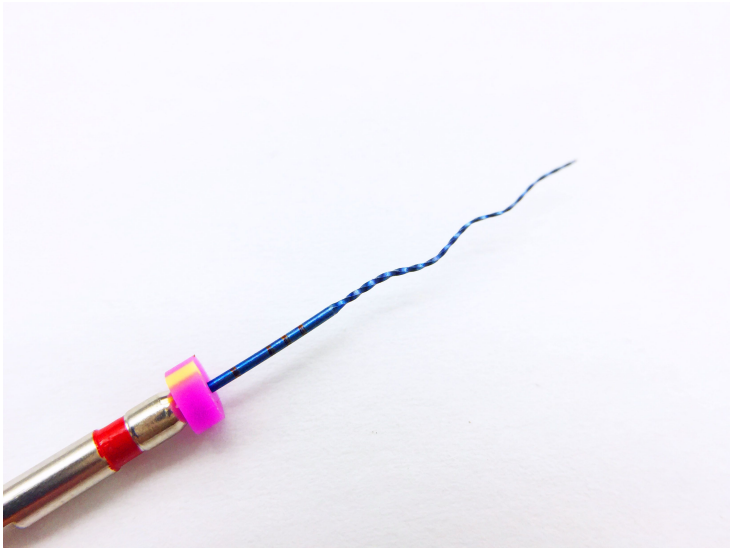

Pret:

33,70 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Ac din titan pentru curatarea canalului AF MAX Blue 3

Pentru cur??area ?i prepararea canalului

Vârf inactiv

Conicitate maxim? 0.04. M?rimea vârfului #25

Fabricare automatizat? de înalt? precizie

Pentru cur??area ?i prepararea canalului

Endo Stop

Marcheaz? precis lungimea canalului ?i identific? direc?ia de îndoire a acului

Super elasticitate și flexibilitate extremă

Stres minim aplicat pereților interiori

Curățare a canalului

Finisare excelentă după curățare

Înlătură eficient straturile bacteriene

Ac special cu conicitate maximă de 0.04

Cu cât fal??i acul de mai multe ori cu atât probabilitatea de izolare mecanic? va cre?te ?i acul nu va mai t?ia eficient.

Cercet?rile arat?? c? acul Max poate transporta hipocloritul de sodiu pân? la lungimea de lucru zonei înguste de la vârful apexului f?r? a t?ia suplimentar în dentin?. ?i eficien?a de cur??are a

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

De asemenea, nu va schimba forma preparației canalului radicular, ?i va putea cel mai bun efect de cur??are, distrugând bacteriile în timp ce se salveaz? dentina într-o propor?ie cât mai mare.

Viteza: 800 rpm

Cuplu: 1.0 Ncm

Instructiuni de utilizare

Este necesar sa procesati acele dupa indicatiile de mai jos inainte de fiecare folosire, sterilizarea facandu-se la 126C pentru 30 de minute.

Instructiuni Pas-cu-Pas:

1) Sterilizare in autoclav la 126C pentru 30 minute;

2) Clatiti acele cu ser fiziologic (0.9% NaCl) timp de 10 secunde;

3) Uscati acele folosind seringa de aer de la unit;

1.Irigati canalul
2.Cu ajutorul unui apex locator, pozitionati canalul folosind un pc C Path 10 cu o miscare circulara pana la lungimea de lucru, pentru a obtine o cale de acces optima.
3.Irigati canalul
4.Folositi Max 3 Blue 3 pana la lungimea de lucru cu o miscare pecking de usoara percutie (Miscare Pecking: miscare usoara inpercutie, rotatie in sens orar a canalului pe c ad-anime (viteza: 800 rpm, cuplu 1 Ncm). la lungimea de lucru. Miscarea acului este una de rotatie
5.Irigati canalul
6.Pentru a asigura o mai buna curatare in treimii apicale, procedati asa cum ati facut si in cazul folosirii Max 3 Blue 3 in canal, folositi Max 1 in acelasi mod si cu aceleasi setari mentionate la punctul 4.
7.Irigati canalul

Prezentare

- 1 bucata Max Blue 3
- varf #25