Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ac curatare canal AF MAX 1



Pret:

33,70 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Ac pentru curatarea canalului AF MAX 1

DESCARCA BROSURA AF MAX

DESCARCA INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE

Vârf inactiv

Conicitate maxim? 0.04. M?rimea vârfului #25

Fabricare automatizat? de înalt? precizie

Pentru cur??area ?i prepararea canalului

Endo Stop

Marcheaz? precis lungimea canalului ?i identific? direc?ia de îndoire a acului

Super elasticitate și flexibilitate extremă

Stres minim aplicat pereților interiori

Curățare a canalului

Finisare excelentă după curățare

Înlătură eficient straturile bacteriene

Ac special cu conicitate maximă de 0.04

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Cu cât folosi?i acul de mai multe ori cu atât probabilitatea de izolare mecanic? va cre?te ?i acul nu va mai t?ia eficient.

Cercet?rile arat? c? acul Max poate transporta hipocloritul de sodiu pân? la lungimea de lucru canalului radicular de la varful apexului f?r? a t?ia suplimentar în dentin?. Eficien?a de cur??are a zonei înguste de la varful apexului f?r? a t?ia suplimentar în dentin?.

De asemenea, nu vom schimba forma preparc?iei canalului radicular ?i va putea cel mai bun efect de cur??are, distrugând bacteriile în timp ce se salveaz? dentina într-o propor?ie cât mai mare.

Viteza: 800 rpm
Cuplu: 1.0 Ncm

Instructiuni de utilizare

Este necesar sa procesati acele dupa indicatiile de mai jos inainte de fiecare folosire, sterilizarea facandu-se la 126C pentru 30 de minute.

Instructiuni Pas-cu-Pas:

1) Sterilizare in autoclav la 126C pentru 30 minute;


2) Clatiti acele cu ser fiziologic (0.9% NaCl) timp de 10 secunde;

3) Uscati acele folosind seringa de aer de la unit;

1.Irigati canalul
2.Cu ajutorul unui apex locator negasiti canalul folosind un C Path 10 cu o miscare circulara pana la lungimea de lucru,pentru a obtine o cale de acces optima.
3.Irigati canalul
4.Folositi Max 3 pana la lungimea de lucru cu o miscare pecking de usoara percutie (Miscare Pecking: miscare vers in percutie, rotatie in sens orar a acului pe o adancime (viteza: 800 rpm, cuplu 1 Ncm). la lungimea de lucru. Miscarea acului este una de rotatie
5.Irigati canalul
6.Pentru a asigura o mai buna curatare in timpul preparii canalului folositi Max 1 in acelasi mod si cu acleasi setari menionate la punctul 4.

7.Irigati canalul

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273

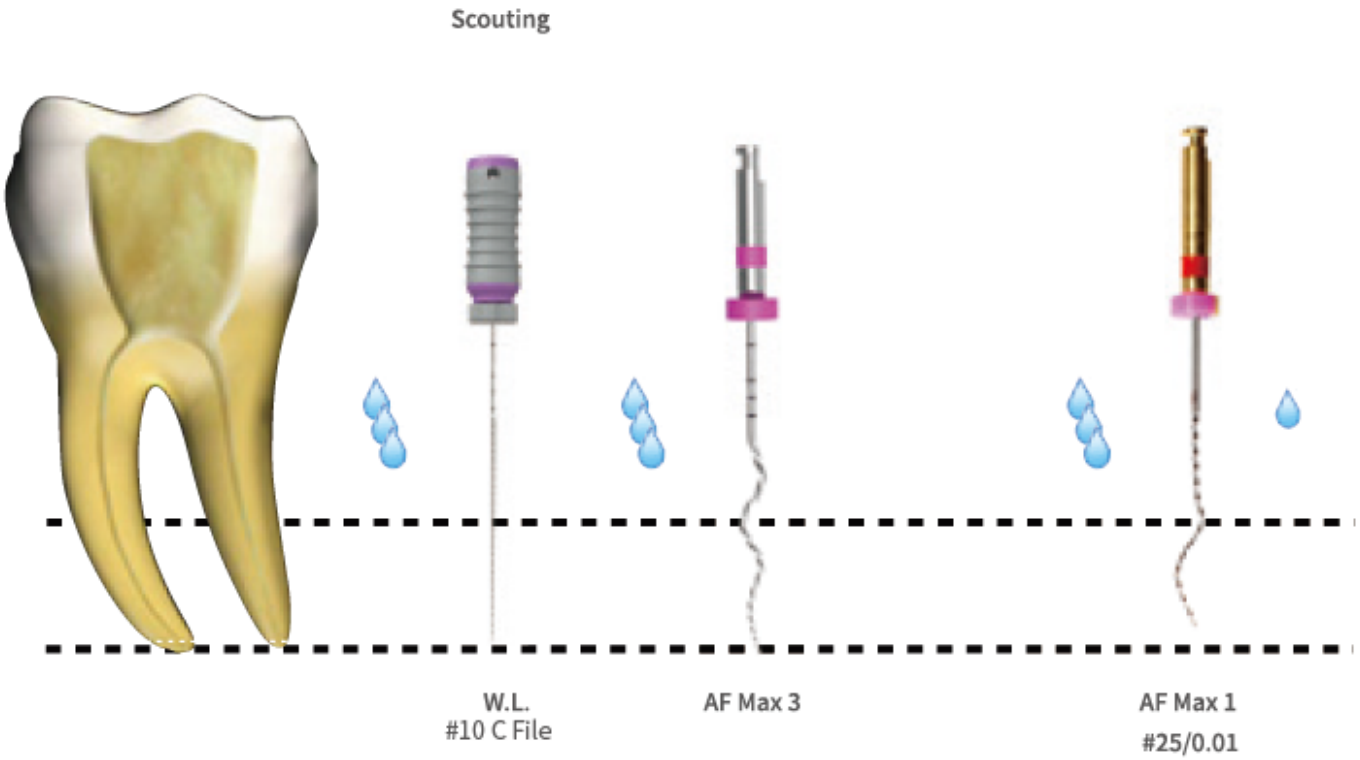

Prezentare

- 1 bucata Max 1
- varf #25